



Independent  
Living Centre  
of WA (Inc)




مؤسسة مركز العيش باستقلالية في ولاية غرب استراليا

يقدم مركز العيش باستقلالية خدمة معلومات واستشارات مجانية وحيادية لمساعدتك على اختيار المنتج الصحيح بالنسبة لك.

The Niche, Suite A, 11 Aberdare Road, NEDLANDS WA 6009 هاتف: 1300 885 886 خط الاستعلامات: (08) 9381 0608

## اختيار رافعة (Hoist) للمنزل

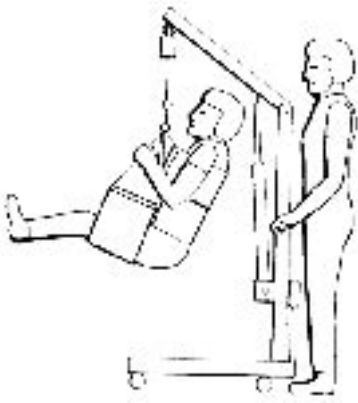

### رافعات للمنزل

إن الغرض من استعمال الرافعات hoists هو للاستغناء عن الحاجة إلى رفع الشخص يدوياً. وتحديد احتياجات كل من الشخص المرفوع ومقدم العناية له سيساعد على تحديد نوع الرافعة الأكثر ملاءمة.

هناك أنواع مختلفة للرافعات المتوافرة:

#### نوع الرافعة

- رافعة متنقلة.
- قائمة / للمرحاض متنقلة.
- سكة مثبتة في السقف أو علوية.
- سكة على إطار علوي.
- رافعات مثبتة على الجدار أو مركبة على الأرض.
- رافعة حمام (ثابتة أو متنقلة).
- مصعد حمام.

#### نوع التشغيل

- قد يكون تشغيل الرافعة يدوياً (هيدروليكيًا) أو كهربائياً (بواسطة البطارية).

### نقاط لأخذها بعين الاعتبار

#### العميل/مقدم العناية

- ما هي احتياجات الانتقال عند الشخص؟
- هل الرافعة مقبولة لكل من الشخص و العائلة/مقدمي العناية الذين يستعملونها؟
- هل مقدم العناية قادر على دفع الرافعة والمناورة بها وتدبير التعامل مع المعاليق slings (التدريب ضروري).

## البيئة (المحيط) / الرافعة

- هل هناك مكان كافٍ لمانورة الرافعة بين الغرف، مع الأخذ بعين الاعتبار عرض الأبواب، والممرات، والدوران الدائري.
- إذا كانت الرافعة ستستعمل للنقل إلى داخل مغطس الحمام ومنه، هل هناك متسع للقاعدة تحت المغطس أو حوله؟ خذ بعين الاعتبار أيضاً استعمال مصعد حمام، أو رافعة حمام ثابتة، أو رافعة مثبتة في السقف.
- عندما تكون القاعدة مفتوحة إلى عرضها الأقصى هل يمكن تدويرها حول المراض وحول الكراسي أو تحتها.
- هل قاعدة السرير عالية بشكل كافٍ بحيث يمكن أن تتحرك الرافعة تحته دون عوائق؟ خذ بعين الاعتبار استعمال مكعبات للسرير لرفع علوه.
- هل التشغيل الميكانيكي أو الهيدروليكي (بواسطة السوائل) أو الكهربائي الأكثر ملاءمة؟ خذ بعين الاعتبار سلاسة التشغيل، والجهد المطلوب، ومدى قدرة الشخص الذي سيرفع على المساعدة في التشغيل؟
- ما هو مدى الرفع للرافعة؟ هل يمكن أن ترفع الشخص من على الأرض؟ في أعلى ارتفاع لها هل يمكن نقل الشخص (في المعلاق) فوق السرير/كرسي المقعدين، الخ؟
- ما هو نوع المعلاق الذي سيستعمل مع الرافعة؟

• هناك مجموعة واسعة من المعاليق المصممة لأغراض مختلفة. وإذا استعملت الرافعات والمعاليق بشكل صحيح فلها القدرة على التقليل من التعامل اليدوي غير الآمن.

- إذا كانت ستستعمل في مناطق مكسوة بالسجاد: هل ستتحرك الرافعة المتنقلة بحرية فوق السجاد؟ هل ستحد الطبقة السفلية تحت السجاد من الحركة؟
  - العجلات الأكبر تجعل الرافعة أسهل للمناورة ولكن تستلزم فسحة خالية أوسع تحت الأثاث.
  - هل هناك مكان كافٍ لتخزين الرافعة عندما لا تستعمل؟
  - هل سيتطلب تفكيكها؟
  - هل تسهيلات الخدمة والتصليح متوفرة؟
  - الرافعات التي تعمل بالبطارية يتطلب شحنها بصورة منتظمة.
- إن إجراء تقييم شامل لاحتياجات العميل ومقدم العناية والبيئة (المحيط) ضروري لاختيار الرافعة والمعلاق الأكثر ملاءمة لكل حالة.

## موقع المركز

The Niche  
Suite A, 11 Aberdare Road

NEDLANDS WA 6009

مكتب الاستقبال: (08) 9381 0600

للمتصلين من الأرياف: 1300 885 886

فاكس: (08) 9381 0611

موقع الإنترنت: [www.ilc.com.au](http://www.ilc.com.au)

الحقوق محفوظة - مركز العيش باستقلالية

© Copyright - Independent Living Centre

