



Independent
Living Centre
of WA (Inc)



مؤسسة مركز العيش باستقلالية في ولاية غرب استراليا

يقدم مركز العيش باستقلالية خدمة معلومات واستشارات مجانية وحيادية لمساعدتك على اختيار المنتج الصحيح بالنسبة لك.

The Niche, Suite A, 11 Aberdare Road, NEDLANDS WA 6009 هاتف: 1300 885 886 خط الاستعلامات: (08) 9381 0608

توجيهات لمساعدتك عند

اختيار معلاق (Sling)

المعلاق

يستخدم المعلاق sling بالاشتراك مع رافعة hoist متحركة أو ثابتة لنقل الشخص. ويتعين أن يوفر المعلاق الدعم والراحة للشخص الموضوع في المعلاق، وأن يكون سهل الاستعمال بالنسبة للشخص الذي يقدم العناية. إذا كان العميل غير مرتاح أو غير ثابت أثناء وضعه في المعلاق فعلى الأرجح أن لا يتم استعمال رافعة.

أنواع المعاليق

هناك مجموعة من المعاليق متنوعة الحجم والأشكال، تختلف من شركة مصنعة إلى أخرى، وفي بعض الأحيان تقوم الشركات المصنعة بتعديل المعلاق لملاءمة احتياجات الشخص.

تشمل الأنواع الرئيسية للمعاليق المتوافرة في الأسواق:

معلاق لأغراض استعمال عامة، فاصل بين الساقين، مع دعم للرأس: ملائم لشخص بحاجة إلى دعم لكامل الجسم والرأس.

معلاق لأغراض استعمال عامة، فاصل بين الساقين، دون دعم للرأس:

مثل الوارد أعلاه ولكن دون دعم للرأس. ملائم لشخص لديه تحكم جيد برأسه. (القطعة التي تفصل الساقين تكون متصالبة في الوسط، ولا تترك دون مصالبة أو توضع تحت الردفين).

معلاق هاموك Hammock:

معلاق لكامل الجسم مع دعم للرأس وقطعة للساقين (لا يوجد فاصل بين الساقين). لا يمكن وضع المعلاق في وضعيته وإزالته إلا عندما يكون الشخص مستلقياً في السرير. قد يكون له فتحة للجلوس على كرسي النونية. غير ملائم لعميل جالس.

معلاق هاموك Hammock - فاصل بين الساقين:

مثل الوارد أعلاه ولكن يوجد فاصل بين الساقين مما يتيح وضع المعلاق عندما يكون الشخص بوضعية الجلوس. قد يقدم دعماً أكثر سلاسة تحت الردفين عن معلاق لأغراض الاستعمال العامة.

معلاق المراحيض:




ملائم لشخص يكون لديه عادة تحكم جيد بجذعه ووركيه. له حزام ضيق يوضع حول الجذع، وقطع طويلة لفصل الساقين. يتيح سهولة نزع الثياب أثناء استعمال المراحيض وارتداء الثياب.

معلاق شريطي BandSling:

بشكل عام، لا يشجع على استعماله نظراً لاحتمال الانزلاق منه، والضغط الذي يمكن حدوثه تحت الإبطين.

معاليق الرافعات القائمة:

تستعمل معاليق الرافعات القائمة فقط مع الرافعات القائمة، وعندما يكون باستطاعة العميل المساعدة في تحمل الوزن. بعض معاليق الرافعات القائمة متوافرة مع أحزمة للساقين للنقل بوضعية الجلوس.

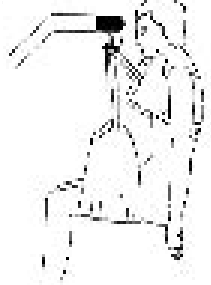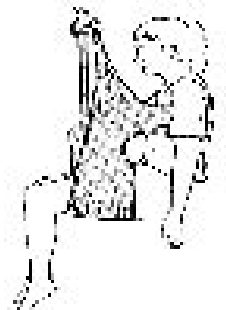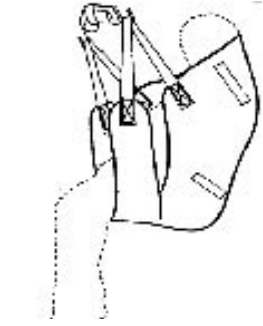

مواد صنع المعاليق

قد تصنع المعاليق من مواد مختلفة، ويعتمد اختيار نوع القماش على الحالة، وتفضيل الشخص ووضعية جسمه. تتضمن أنواع المواد:

- قماش شبكي مصنوع من البوليستر - متين جداً ويدوم لفترة طويلة وتتيح الحبكات المفتوحة التصريف السريع بعد الاستحمام، وتتيح للشخص المرفوع برافعة الرؤية عبر الحبكات المفتوحة.
- قماش بوليستر / نايلون - سلسل وينزلق بسهولة. ويمكن تنظيفه بسهولة، وتجفيفه بسرعة، ويدوم لفترة طويلة.
- قماش كانفا Canvas - قماش أكثر سماكة ولا يُنصح باستعماله لأغراض الاستحمام حيث يستغرق فترة طويلة لكي يجف. غير شائع الاستعمال.

وصلات إضافية للمعاليق

أغلب المعاليق لها أحزمة مصنوعة من النايلون ذات حلقات لتعديل الطول. وتكون هذه الحلقات موصولة بعمود بسط الرافعة.


يمكن أن تشمل الوصلات الإضافية الأخرى مشابك بشكل خرم مفتاح يمكن استعمالها عند التمييل أو لتدوير الإطارات على الرافعة على محور.

يتعين أن يكون للمعاليق مقابض حلقات إضافية للمساعدة في وضع الشخص بالوضعية الصحيحة.

نقاط لأخذها بعين الاعتبار

- تختلف حجوم المعاليق إلى حد كبير من شركة مصنعة إلى أخرى.
- يتعين تجربة المعاليق قبل شرائها لمعرفة الموديل ومادة الصنع والحجم الصحيحين.
- يتعين أن لا تترك المعاليق إطلاقاً تحت الشخص أثناء جلوسه أو استلقائه حيث يمكن أن يتهيج الجلد أو يلحقه ضرر.
- قد يكون من المفيد شراء معالقين للشخص لإفساح المجال لغسلهما.
- يتعين تعديل المعالق لكل حالة نقل. وعند نقل شخص من كرسي إلى سرير فإن تطويل الأحزمة العليا وتقصير أحزمة الساقين يمكن أن يساعد على الاستلقاء. وعند النقل من السرير إلى الكرسي فإن تقصير الأحزمة العليا وتطويل أحزمة الساقين سيصبح وضعية أكثر استقامة.
- إجراء تقييم للاحتياجات وحالات الاستعمال أمر ضروري لاختيار المعالق الأكثر ملاءمة لكل حالة نقل.
- قد يكون بوسع إخصائي المعالجة المهنية في مركز العيش باستقلالية مساعدتك في اختيار المعدات الملائمة.

تتوافر منشورات عن مواضيع أخرى.

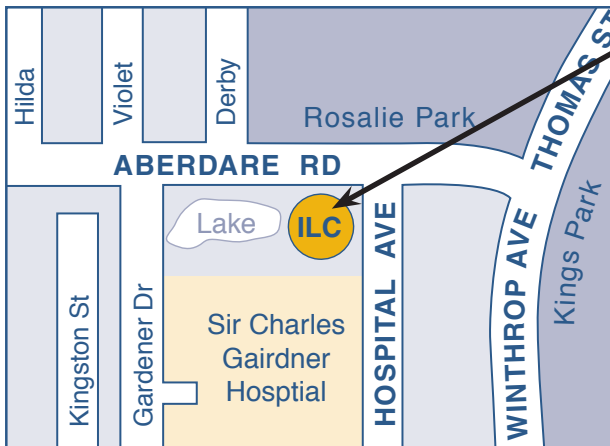

موقع المركز

The Niche
Suite A, 11 Aberdare Road

NEDLANDS WA 6009

مكتب الاستقبال: (08) 9381 0600

للمتصلين من الأرياف: 1300 885 886

فاكس: (08) 9381 0611

موقع الإنترنت: www.ilc.com.au

الحقوق محفوظة - مركز العيش باستقلالية

© Copyright - Independent Living Centre