



**Independent
Living Centre
of WA (Inc)**



مؤسسة مركز العيش باستقلالية في ولاية غرب استراليا

يقدم مركز العيش باستقلالية خدمة معلومات واستشارات مجانية وحيادية لمساعدتك على اختيار المنتج الصحيح بالنسبة لك.

The Niche, Suite A, 11 Aberdare Road, NEDLANDS WA 6009 هاتف: 1300 885 886 خط الاستعلامات: (08) 9381 0608

اختيار إطار مساعد على المشي

- تشمل الخيارات الأخرى:
- عجلات أو بدون عجلات.
- فرامل أو بدونها.
- مقعد أو بدون مقعد.
- صينية / حقيبة / سلة.
- أنواع عجلات مختلفة.
- مقابض لليدين مختلفة.
- دعائم للساعدين.



الإطارات المساعدة على المشي دون عجلات

تعتبر أفضل الأنواع للذين لديهم ضعف في المشي أو التحكم في التوازن، الذين بحاجة إلى إطار مساعد على المشي أكثر ثباتاً من الإطارات المساعدة على المشي ذات العجلات.

- هل تشعر بالأمان عند استعمال إطار مساعد على المشي؟
- هل يمنحك دعماً كافياً؟
- هل يمكن تعديل ارتفاعه، أو هل يتوافر بالارتفاع الصحيح لإتاحة الوقوف بوضعية مستقيمة؟
- يتعين أن يكون خفيف الوزن.
- يتطلب تعليمات للطريقة الصحيحة للاستعمال.


هل يمكنك التحكم بإطار
مساعد على المشي إذا
كان له عجلات؟

الإطارات المساعدة على المشي ذات العجلات

إطارات مساعدة على المشي بعجلتين مع سدادات إيقاف (Stoppers) ومنزلاقات (Glides) خلفية

سهلة الاستعمال للذين:

- ليست لديهم القوة لرفع وحمل إطار مساعد على المشي عادي.
- غير قادرين على المناورة بشكل صحيح باستعمال إطار مساعد على المشي عادي.

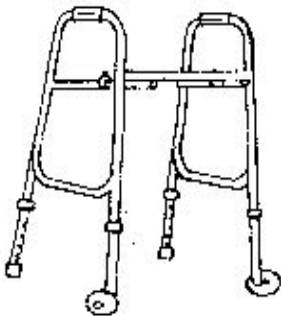

تلائم على أفضل وجه الاستعمال في المناطق الداخلية. المنزلاقات لا تنزلق بشكل جيد فوق السطوح الخارجية الوعرة. يمكن استعمالها بطريقة "التميل والتدوير".

هل تحتاج إلى استعمال الفرملة؟ هل أنت قادر على تشغيل الفرامل؟

الإطارات المساعدة على المشي ذات الثلاث عجلات

تلائم الذين لديهم تحكم بالمشي جيد إلى حدٍ معقول، ويمكنهم تشغيل الفرملة اليدوية.



- جيدة للمناورة في المناطق الداخلية والخارجية.
- يجب فتحها بالكامل وإلا يمكن أن تنقلب.
- تتوافر ملحقات إضافية مثل الصواني، والحقائب، والسلل، لإتاحة المجال للمستعمل لحمل الأغراض.


الإطارات المساعدة على المشي ذات الأربع عجلات

تلائم الذين لديهم توازن وتحكم بالمشي جيدان إلى حدٍ معقول، الذين بحاجة إلى دعم إضافي لقطع مسافات أطول، أو الذين يرغبون وجود مقعد للاستراحة عليه. من المهم أن يكون المستعمل قادراً على تشغيل الفرامل. تتوافر أنواع مختلفة. تشمل المواصفات التي يتعين أخذها بعين الاعتبار:

- أنواع الفرامل: فرملة يدوية أو فرامل من نوع "سدادات إيقاف stoppers" - مدى سهولة استعمال الفرامل.
- الوزن - بعض الإطارات المساعدة على المشي ثقيلة الوزن لحملها.
- آلية الطوي - هل من السهل حملها ووضعها في صندوق السيارة؟
- يمكن تعديل ارتفاع المقابض/دعائم الساعدين.
- مع مقعد أو بدونه.
- إطارات العجلات: ميكروسيلولار Microcellular / مطاط صلب / هواء مضغوط.
- السلل والصواني.
- مقابض اليمين - أشكال مختلفة يمكن أن تؤثر على الراحة.



تتوافر منشورات عن مواضيع أخرى.

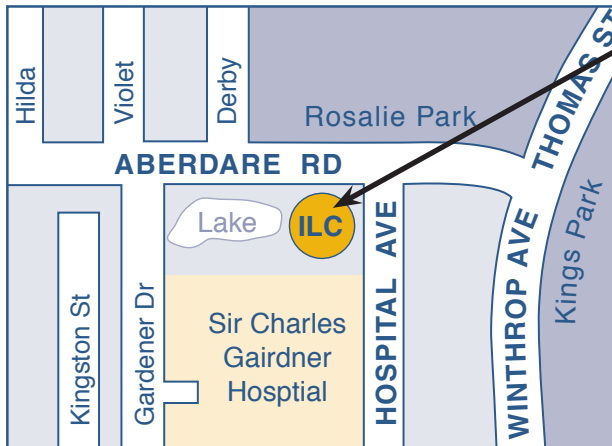

موقع المركز

The Niche
Suite A, 11 Aberdare Road

NEDLANDS WA 6009

مكتب الاستقبال: (08) 9381 0600

للمتصلين من الأرياف: 1300 885 886

فاكس: (08) 9381 0611

موقع الإنترنت: www.ilc.com.au

الحقوق محفوظة - مركز العيش باستقلالية

© Copyright - Independent Living Centre