



Independent
Living Centre
of WA (Inc)



Centar za nezavisan život WA (Inc)

Centar za nezavisan život (Independent Living Centre) pruža besplatne i nepristrane informacije i savjete, pomažući vam tako da izaberete proizvod koji vam najbolje odgovara

The Niche, Suite A,11 Aberdare Road, NEDLANDS WA 6009 Telefon: 1300 885 886 Informativna linija: (08) 9381 0608

Vrste ramova za hodanje

Ramovi za hodanje bez točkova

Prikladni su za osobe kojima je hodanje naporno i koje nemaju dobar osjećaj za ravnotežu, i kojima je potreban stabilniji ram za hodanje od onoga na točkovima.

Poželjno je da mu se visina može podešavati i da je sklopiv. Ram mora biti lagan.

Mora imati uputstva za upotrebu.



Ramovi za hodanje na točkovima

Dvokotačni okviri sa stražnjim kočnicama i kliznim pločama


Jednostavni su za korištenje osobama koje:

- ne mogu dizati i nositi standardni ram za hodanje
- ne mogu pravilno manevrisati standardnim ramom za hodanje

Ovakav ram prikladan je za korištenje u zatvorenim prostorima.

Klizne ploče ne mogu dovoljno dobro klizati po grubim površinama vanjskog terena.

Moguće ga je koristiti laganim naginjanjem prema naprijed, što omogućava njegovo guranje na točkovima.

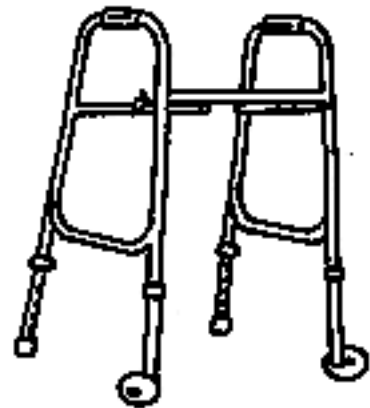


Ramovi za hodanje na tri točka

Prikladni za osobe koje imaju relativno siguran hod i koje mogu koristiti ručne kočnice.

Okvir pruža mogućnost laganog manevriranja na otvorenim, kao i u zatvorenim prostorima.

Mora biti potpuno otvoren, inače može da se prevrne.

Dodaci poput košara i torbi, koji korisniku omogućavaju nošenje stvari, također su dostupni kao izborna mogućnost.

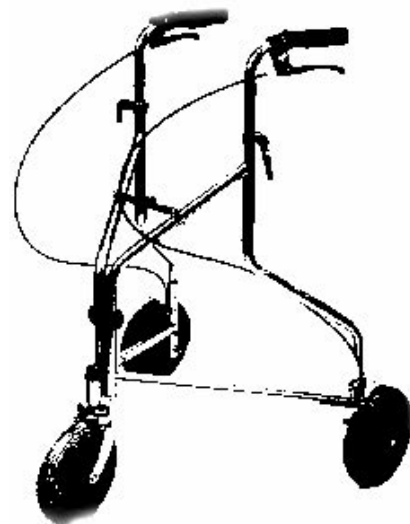

Ramovi na četiri točka

Prikladni za osobe koje imaju relativno siguran hod i dobar osjećaj za ravnotežu, ali im je potrebna dodatna pomoć prilikom prelaženja dužih relacija, ili koje trebaju sjedalo na kojem se mogu odmoriti kada se umore. Vrlo je važno da je korisnik u stanju da koristi kočnice. Postoji više vrsta sličnih ramova za hodanje.

U mogućnost izbora ulazi:

odabir prikladne kočnice, npr:

- ručne
- tzv. zaustavne kočnice.
- Ove kočnice mogu da se jednostavno koriste.

Težina - neke od ovih ramova je teže podići.

Mehanizam za sklapanje - npr. trebate razmisliti koliko vam je jednostavno staviti ramu u prtljažnik automobila

Mogućnost izbora ručki sa opcijom podešavanja visine/ oslonca za nadlaktice

Mogućnost izbora rama sa sjedalom ili bez sjedala


Gume: mikrocelularne/od pune gume/pneumatske

Torbe i košare

Ručke - dostupne u nekoliko različitih oblika, za bolji komfor.



Dostupne su vam i brošure o drugim temama

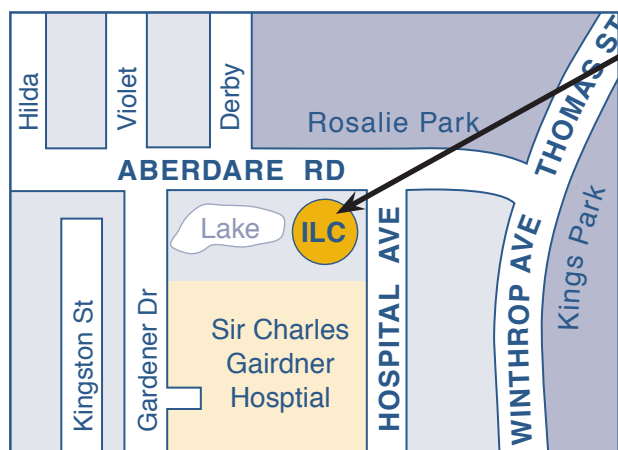

Gdje nas možete naći:

The Niche
Suite A, 11 Aberdare Road
NEDLANDS WA 6009

Recepcija: (08) 9381 0600

Pozivi iz unutrašnjosti:
1300 885 886

Faks: (08) 9381 0611

www: www.ilc.com.au

© Copyright - Independent Living Centre