



西澳獨立生活中心



西澳獨立生活中心(Independent Living Centre) 提供免費和公正的信息和諮詢服務，幫助你選擇適合你的產品。


地址：The Niche, Suite A, 11 Aberdare Road, NEDLANDS WA 6009 電話：1300 885 886 諮詢熱線：(08) 9381 0608

手動輪椅

市場上有許多種手動輪椅。它們有適合小孩和大人不同尺寸，不同重量，有標準的功能，或者根據個人需要訂做。

選擇正確輪椅時，需要考慮很多因素，例如：

- 使用者的需要、能力和限制
- 護理人員的需要、能力和限制
- 環境因素
- 交通問題
- 經濟問題

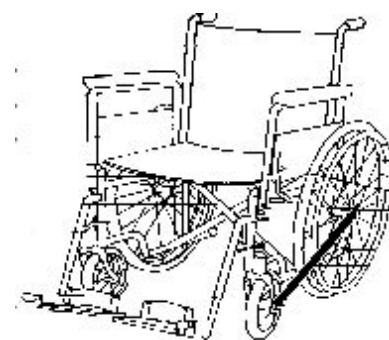

對這些因素的評估有助於決定所需的輪椅種類、大小、功能和/或配件。

手動輪椅的種類

後輪驅動： 這是一種標準的輪椅，後輪大，前輪是可以旋轉的轉輪。

前輪驅動： 這是一種標準的輪椅，前輪大，後輪是可以旋轉的轉輪。

獨臂驅動： 這種輪椅跟後輪驅動的輪椅的構造相似，但是可以通過以下方式獨手驅動：

- 用一個推/拉杠杆。
- 通過推動附在輪椅一邊的推輪，其內輪跟另一個輪子相接。

載運輸椅： 這種輪椅需要人推的輪椅，它們的輪子較小，由人推動。

裁肢輪椅： 這種輪椅有較長的輪子底座，以補償裁肢人士中心移動的特點。

後躺輪椅： 前輪和後輪驅動的輪椅都可以安裝活動躺椅狀紙，使座位/後背的角度可以打開。

傾斜式： 這種輪椅有一個固定的座位/後背角度，使座位和後背能夠向後傾斜成為一個單位。

標準輪椅功能

手動輪椅有以下一些標準功能：

- 框架：可以安裝，很牢固，有效，合適能夠自己推動輪椅的人士，可以折疊，便於運輸。
- 裝襯墊：可以是可拆卸的襯墊，用乙烯 脂或其它如尼龍材料做成。也可以汽車那樣給輪椅加全部的襯墊，或者後背加襯墊，座位用特殊的硬材料。
- 扶手：基本上有兩種。全長度的，或者桌子形狀的扶手，以便使用者能夠靠近桌子。兩種扶手都可以拆卸和/或翻出來，並可調整高度。
- 靠腳：可以移動和拆卸，或固定。其特點包括可調整高度，一個或兩個踏腳板，可以調整高度支撐小腿。
- 煞車：推或拉煞車。兩種都有加長的手柄。
- 輪子：自己推動或運輸型的。自己推動的輪椅可以安裝各種推輪，也可以有能夠調整的軸位，也可以拆卸以便運輸。
- 輪胎/轉輪：許多輪椅都可以選用不同的輪子，如充氣的、實心的、微份子材料或防刺材料。
- 傾斜杠杆：這是在腳的部位安裝一個腳板，在過小坎如門坎的時候，可以把輪椅往後傾斜一點。

測量輪椅

決定正確尺寸的輪椅對於保證使用者舒服和保持好的姿勢來說是非常重要的。


為方便使用者和/或護理人員，需要考慮以下內容：

座位的寬度、深度和高度；扶手的高度；靠背的高度；腳板和座位的距離；推動手柄的高度。

獨立生活中心能夠：

- 提供各種輪椅和輪椅功能的信息
- 提供機會試用各廠家的不同輪椅
- 具有設備出租部，可以安排短期租用。

還有其它內容的介紹資料

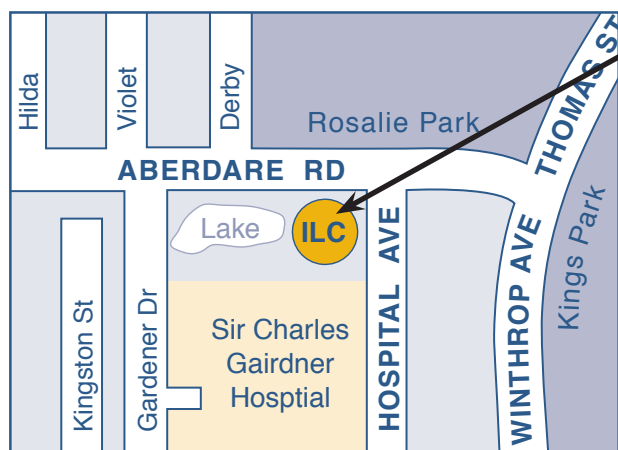

何處可以找到我們

地址：
The Niche
Suite A, 11 Aberdare Road
NEDLANDS WA 6009

接待處： (08) 9381 0600
鄉村地區請撥打： 1300 885 886
傳真： (08) 9381 0611
網址： www.ilc.com.au