



Independent  
Living Centre  
of WA (Inc)



Centar za nezavisan život WA (Inc)


Centar za nezavisan život (Independent Living Centre) pruža besplatne i nepristrane informacije i savjete, pomažući vam tako odabrati proizvod koji vam najbolje odgovara

The Niche, Suite A,11 Aberdare Road, NEDLANDS WA 6009 Telefon: 1300 885 886 Informativna linija: (08) 9381 0608

# Odabir kućne dizalice za onesposobljene

## Kućne dizalice

Dizalice su dizajnirane kako bi se izbjegla potreba ručnog dizanja onesposobljene osobe. Utvrđivanje individualnih potreba kako onesposobljene osobe, tako i njenog njegovatelja, pomoći će vam prilikom donošenja odluke o tome kakva dizalica je najpogodnija.

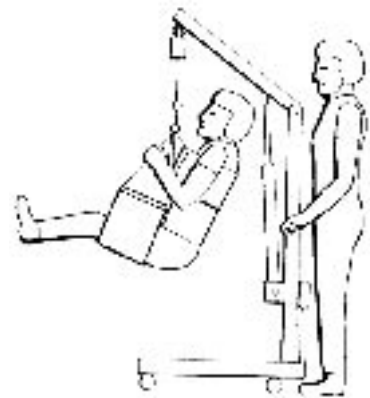

**Postoji nekoliko vrsta dizalica koje su trenutno dostupne:**

### Vrsta dizalice

- pokretna dizalica
- pokretna dizalica – za podizanje u stojeći položaj/na zahod
- stropna ili fiksna viseća tračna
- tračna na visokom okviru (tzv. "Gantry"dizalica)
- fiksna, podna ili zidna dizalica
- dizalica za kadu (fiksna ili pokretna)
- dizalica za podizanje u kadu

### Vrsta operacije

- dizalica može biti na ručni (hidraulički) ili električni (baterijski) pogon.

## Pitanja na koja je potrebno obratiti pažnju

### Klijent / njegovatelj:

- Kakve su potrebe onesposobljene osobe za transferom?
- Da li je dizalica jednako prikladna kako za onesposobljenu osobu, tako i za njegovatelja/obitelj?
- Da li je njegovatelj u stanju gurati i manevrirati dizalicom i visećim sjedalom? (Prethodna obuka je neophodna).


## Dizalica/prostor u kojem se koristi:

- Ima li u kući dovoljno mjesta za manevriranje dizalicom između soba, imajući u vidu širinu vratnih okvira, prolaza i mogućnost zaokretanja?
- Ukoliko se dizalica koristi za podizanje osobe u kadu i izvan nje, može li je se pričvrstiti ispod kade li oko nje? Razmislite o mogućnosti korištenja kadnog dizala, fiksne kadne ili stropne dizalice.
- Kada se postolje dizalice maksimalno raširi, može li se smjestiti oko zahodske školjke ili ispod stolice?
- Da li je podnožje kreveta dovoljno visoko da bi se osnovica dizalice mogla slobodno micati ispod kreveta? Ukoliko je potrebno, možete koristiti krevetne blokove, kojima možete podići krevet na veću visinu.
- Kakva bi dizalica bila najprikladnija: mehanička, hidraulička ili električna? U obzir uzmite jednostavnost korištenja, stupanj uloženog napora i tjelesnu kondiciju osobe koju je potrebno dizati, tj. koliko je onespobljena osoba u stanju pomoći prilikom dizanja
- Koji raspon dizalica pokriva? Može li se njome podići osobu sa poda? Da li će se onespobljena osoba (u visećem sjedalu) moći podići sa kreveta/bolesničkih kolica, dok je dizalica na najvećoj visini?
- Koja vrsta visećeg sjedala će se koristiti sa dizalicom?

- Postoji cijeli niz visećih sjedala koja su dizajnirana za različite svrhe. Dizalice i sjedala, ukoliko ih se pravilno koristi, imaju kapacitet umanjiti rizik prilikom ručnog dizanja.

- Ukoliko će je se koristiti u tepihom pokrivenim prostorima:  
Da li će se pokretna dizalica moći nesmetano gurati preko tepiha?  
Da li će podno pokrivalo ograničiti njenu pokretljivost?
- Veći kotači omogućavaju lakše kretanje po tepihu, ali u tom slučaju namještaj mora biti viši.
- Ima li u kući dovoljno prostora gdje bi se dizalica može smjestiti dok nije u upotrebi?
- Da li će je se morati rastaviti?
- Postoji li služba za popravak, ukoliko vam bude potrebna?
- Baterije u dizalicama na baterijski pogon, moraju se redovno puniti.

U svakom pojedinom slučaju, potrebno je najprije provesti temeljitu procjenu potreba klijenta i njegovog njegovatelja, kao i samog prostora u kojem će se dizalica koristiti, kako bi se mogla odabrati adekvatna dizalica i viseće sjedalo koje će se uz nju koristiti.

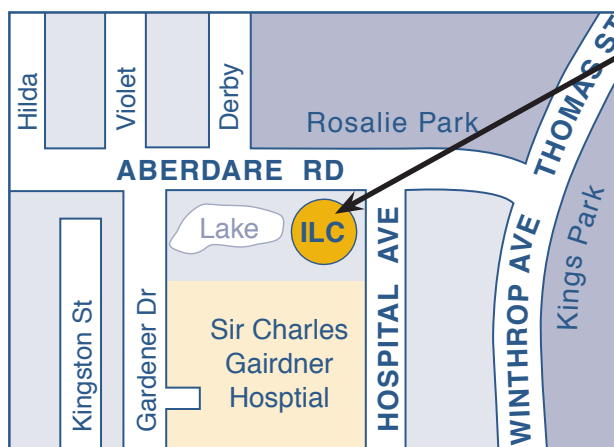

### Gdje nas možete naći:

The Niche  
Suite A, 11 Aberdare Road  
NEDLANDS WA 6009

Recepcija: (08) 9381 0600

Pozivi iz unutrašnjosti:

1300 885 886

Faks: (08) 9381 0611

www: [www.ilc.com.au](http://www.ilc.com.au)

© Copyright - Independent Living Centre