



Independent
Living Centre
of WA (Inc)



Centar za nezavisan život WA (Inc)

Centar za nezavisan život (Independent Living Centre) pruža besplatne i nepristrane informacije i savjete, pomažući vam tako odabrati proizvod koji vam najbolje odgovara

The Niche, Suite A,11 Aberdare Road, NEDLANDS WA 6009 Telefon: 1300 885 886 Informativna linija: (08) 9381 0608

Vrste okvira za hodanje

Okviri za hodanje bez kotača

Prikladni su za osobe kojima je hodanje naporno i koje nemaju dobar osjećaj za ravnotežu, te kojima je potreban stabilniji okvir za hodanje od onoga na kotačima.

Poželjno je da mu se visina može podešavati i da je sklopiv. Okvir mora biti lagan.

Mora imati uputstva za upotrebu.



Okviri za hodanje na kotačima

Dvokotačni okviri sa stražnjim kočnicama i kliznim ploham


Jednostavni su za korištenje osobama koje:

- ne mogu dizati i nositi standardni okvir za hodanje
- ne mogu pravilno manevrirati standardnim okvirom za hodanje.

Ovakav okvir prikladan je za korištenje u zatvorenim prostorima.

Klizne plohe ne mogu dovoljno dobro klizati po grubim površinama vanjskog terena.

Moguće ga je koristiti laganim nagnjanjem prema naprijed, što omogućava njegovu guranje na kotačima.

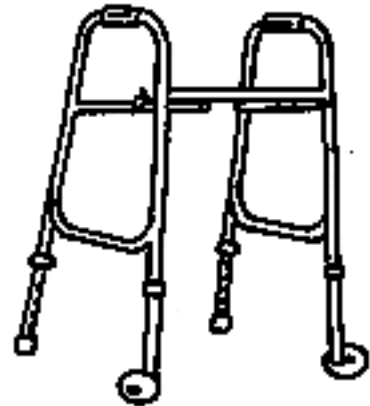


Trokotačni okviri za hodanje

Prikladni za osobe koje imaju relativno siguran hod i koje mogu koristiti ručne kočnice.

Okvir pruža mogućnost laganog manevriranja na otvorenim, kao i u zatvorenim prostorima.

Mora biti potpuno otvoren, inače se može prevrnuti.

Dodaci poput košara i torbi, koji korisniku omogućavaju nošenje stvari, također su dostupni kao izborna mogućnost.

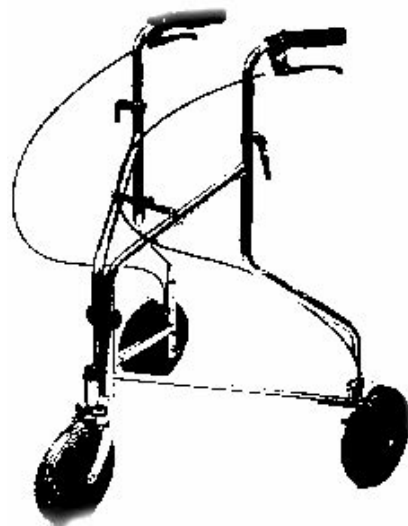

Okviri na četiri kotača

Prikladni za osobe koje imaju relativno siguran hod i dobar osjećaj za ravnotežu, ali im je potrebna dodatna pomoć prilikom prelaženja dužih relacija, ili koje trebaju sjedalo na kojem se mogu odmoriti kada se umore. Vrlo je važno da je korisnik u stanju koristiti kočnice. Postoji više vrsta sličnih okvira za hodanje.

U mogućnost izbora ulazi:

Odabir prikladne kočnice, npr:

- ručne
- tzv. zaustavne kočnice.
- kočnice koje je jednostavno koristiti.

Težina - neke od ovih okvira je teže podići.

Mehanizam za sklapanje - npr. trebate razmisliti koliko vam je jednostavno staviti okvir u prtljažnik automobila

Mogućnost izbora ručki sa mogućnošću podešavanja visine/oslonca za nadlaktice

Mogućnost izbora okvira sa sjedalom ili bez sjedala


Gume: mikrocelularne/od pune gume/pneumatske

Torbe i košare

Ručke - dostupne u nekoliko različitih oblika, za bolju udobnost



Dostupne su vam i ostale brošure o drugim temama

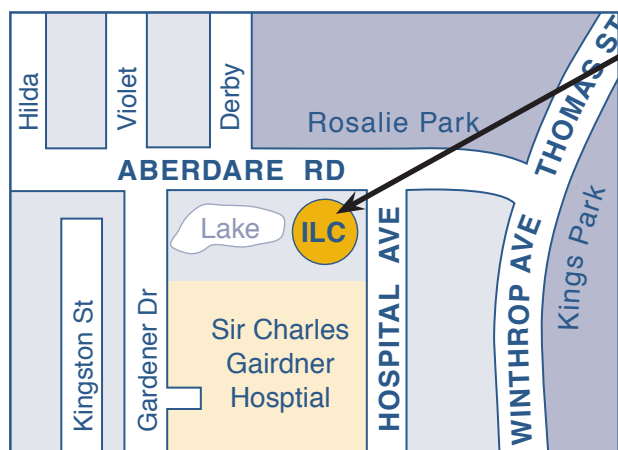

Gdje nas možete naći:

The Niche
Suite A, 11 Aberdare Road
NEDLANDS WA 6009

Recepcija: (08) 9381 0600

Pozivi iz unutrašnjosti:
1300 885 886

Faks: (08) 9381 0611

www: www.ilc.com.au

© Copyright - Independent Living Centre