



 Independent
Living Centre
of WA (Inc)



Centro per una vita indipendente del Western Australia (Inc)


Il Centro per una vita indipendente offre un servizio di informazioni e consulenza gratuito e imparziale per aiutarvi a scegliere il prodotto giusto per voi

The Niche, Suite A, 11 Aberdare Road, NEDLANDS WA 6009 Telefono: 1300 885 886 Informazioni: (08) 9381 0608

La scelta del sollevatore per uso domestico

Sollevatori per uso domestico

I sollevatori sono pensati per eliminare la necessità di sollevare una persona manualmente. Una volta individuate le esigenze sia della persona che viene sollevata sia di chi se ne occupa, sarà più semplice determinare il tipo di sollevatore più adatto.

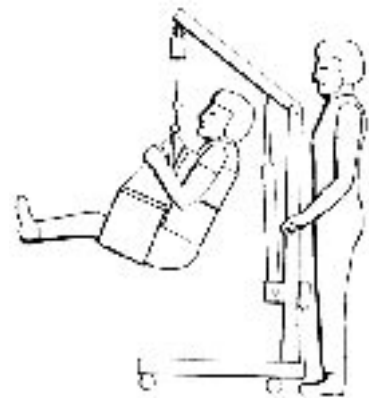

Esistono diversi tipi di sollevatori:

Tipo di sollevatore

- Sollevatore mobile
- Mobile per posizione eretta / operazioni igieniche
- A binario fisso al soffitto o sopra alla testa
- A binario sull'intelaiatura sopra alla testa (cavalletto)
- Fisso alla parete o montato sul pavimento
- Per la vasca da bagno (fisso o portatile)
- Sollevatore a sedile per vasca

Tipo di funzionamento

- Il funzionamento del sollevatore può essere manuale (idraulico) o elettrico (a batterie).

Aspetti da considerare

Cliente/Accompagnatore

- Quali sono le necessità di trasferimento della persona?
- Il sollevatore è accettato dall'utente e dalla famiglia/accompagnatori che lo utilizzano?
- L'accompagnatore è in grado di spingere e manovrare il sollevatore e di impiegare l'imbracatura?
(E' essenziale avere un addestramento).

continua...


Ambiente / Sollevatore

- C'è abbastanza spazio di manovra tra le stanze per il sollevatore, considerata la larghezza delle porte, i corridoi e i giri in circolo?
- Se il sollevatore deve essere utilizzato per il trasferimento nella/fuori dalla vasca da bagno, è possibile inserire la base sotto o intorno alla vasca? Considerare anche l'impiego di un elevatore per la vasca, di un sollevatore fisso alla vasca o al soffitto.
- Qualora la base sia aperta al massimo in ampiezza, è possibile farla passare intorno al water e intorno o sotto alle sedie?
- La base del letto è alta abbastanza per permettere al sollevatore di muoversi sotto liberamente? Considerare l'uso di blocchetti per elevare il letto in altezza.
- Il funzionamento più indicato è quello meccanico, quello idraulico, o quello elettrico? Considerare se il funzionamento non presenta ostacoli, nonché lo sforzo necessario e la capacità della persona che deve essere sollevata di coadiuvare nell'operazione.
- Qual è la capacità di sollevamento del sollevatore? E' in grado di sollevare una persona da terra? Al grado di elevazione più alto, la persona (imbracata) si distanzia dal letto/sedia a rotelle ecc... liberandoli?
- Che tipo di imbracatura si utilizzerà con il sollevatore?

• Esiste una vasta gamma di imbracature pensate per diversi scopi. I sollevatori e le imbracature, se impiegati correttamente, sono in grado di ridurre una pratica manuale poco sicura.

- Qualora si debba utilizzare su tappeti o moquette:
Il sollevatore mobile riesce a muoversi liberamente sul tappeto o sulla moquette?
La sottomoquette ostacola il movimento?
- Ruote piroettanti più grandi permettono di manovrare il sollevatore più facilmente ma necessitano di uno spazio maggiore sotto i mobili.
- Vi è abbastanza spazio per riporre il sollevatore quando non viene utilizzato?
- Deve essere smontato?
- Esistono centri di assistenza e riparazione?
- I sollevatori a batteria hanno bisogno di essere ricaricati regolarmente.

E' necessario effettuare una valutazione attenta delle esigenze del cliente, di chi se ne occupa, e dell'ambiente, in modo da scegliere il sollevatore e l'imbracatura più adatti ad ogni situazione.

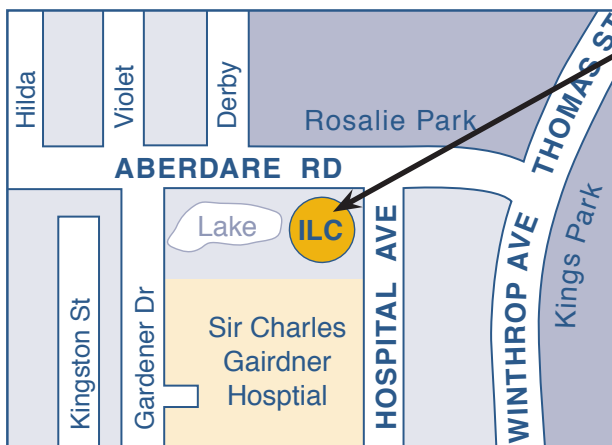

Dove siamo

The Niche
Suite A, 11 Aberdare Road
NEDLANDS WA 6009

Centralino: (08) 9381 0600

Chiamate da zone rurali:
1300 885 886

Fax: (08) 9381 0611

www: www.ilc.com.au