



 Independent
Living Centre
of WA (Inc)



Centro per una vita indipendente del Western Australia (Inc)

Il Centro per una vita indipendente offre un servizio di informazioni e consulenza gratuito e imparziale per aiutarvi a scegliere il prodotto giusto per voi


The Niche, Suite A, 11 Aberdare Road, NEDLANDS WA 6009 Telefono: 1300 885 886 Informazioni: (08) 9381 0608

Carrozze manuali

Sul mercato sono presenti molti tipi di carrozzine manuali, con diverse misure per bambini e adulti, diversi pesi, con caratteristiche standard o con la possibilità di essere personalizzate in base alle esigenze individuali.

Per poter scegliere il tipo di carrozzina giusto, si devono prendere in considerazione molti fattori, quali ad esempio:

- Le necessità, le capacità e i limiti dell'utente.
- Le necessità, le capacità e i limiti dell'accompagnatore.
- Fattori ambientali.
- Questioni relative al trasporto.
- Questioni economiche.

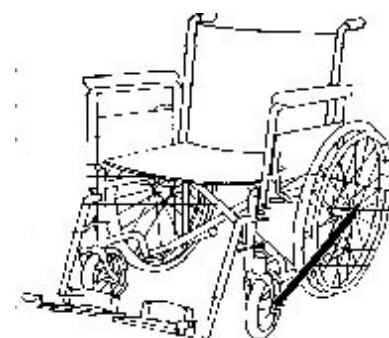

Grazie alla valutazione di tali aspetti si potrà determinare il tipo di carrozzina necessario, le sue dimensioni, e le opzioni e/o accessori più indicati.

Tipi di carrozzina manuale

- | | |
|---|---|
| Autospinta a due mani sulle ruote posteriori: | carrozzina standard con ruote posteriori grandi e ruote anteriori piroettanti. |
| Autospinta a due mani sulle ruote anteriori: | carrozzina standard con ruote anteriori grandi e ruote posteriori piroettanti. |
| Monoguida unilaterale: | carrozzine che presentano la stessa configurazione di quelle ad autospinta posteriore, ma con la possibilità di propulsione monoguida mediante due diverse opzioni: <ul style="list-style-type: none"> • Una manovella push/pull. • Due anelli corrimano, posizionati sullo stesso lato della carrozzina, di cui quello interno è collegato alla ruota opposta. |
| Da transito: | anche note come carrozzine manovrabili dall'accompagnatore o a spinta poiché presentano ruote piccole e sono spinte dall'accompagnatore. |
| Per amputati di un arto: | queste sedie a rotelle presentano una base per le ruote più lunga in modo da compensare lo spostamento del baricentro di una persona che ha subito un'amputazione. |
| Con schienale reclinabile: | entrambe le carrozzine ad autospinta sulle ruote anteriori e su quelle posteriori hanno la possibilità di essere dotate di uno schienale reclinabile, per consentire la regolazione dell'apertura dell'angolo tra il sedile e lo schienale. |
| Sistema basculante: | queste carrozzine sono costituite da un angolo fisso sedile / schienale consentendo l'inclinazione contemporanea di entrambi il sedile e lo schienale. |
| Per prestazioni elevate: | si tratta di carrozzine leggere per utenti attivi. |

Caratteristiche delle carrozzine standard

Le carrozzine manuali presentano caratteristiche standard che comprendono:

Telaio:	può essere rigido, quindi robusto ed efficiente per l'autospinta, o pieghevole e quindi agevole per il trasporto della carrozzina.
Imbottitura:	si tratta di un rivestimento in vinile o altro, ad esempio nylon. Altre carrozzine possono essere completamente imbottite come il sedile di un'automobile o avere lo schienale imbottito e il sedile rigido su cui poter sistemare un cuscino speciale.
Braccioli:	Ne esistono fondamentalmente di due tipi: bracciolo lungo o ridotto, stile "desk", per permettere all'utente di accostarsi al tavolo. Entrambi i tipi sono estraibili e /o ribaltabili con possibilità di regolazione dell'altezza.
Pedane:	possono essere girevoli ed estraibili, oppure fisse. Tra le caratteristiche possibili vi sono la regolazione dell'altezza, il poggiatesta unico o doppio, la capacità di elevazione con poggiatesta.
Freni di stazionamento:	push/pull. Entrambi sono disponibili con manici prolungati.
Ruote:	per l'autospinta o da transito. Il tipo per autospinta può essere dotato di anelli corrimano in diversi stili, può offrire la regolazione della posizione dell'asse e lo smontaggio per agevolare il trasporto.
Tipi di ruote / Ruote piroettanti:	Molte carrozzine offrono la possibilità di scelta tra ruote pneumatiche, rigide, microcellulari o antitorzione.
Levetta di inclinazione:	Offre un fermatesta per agevolare l'assistente nell'inclinazione all'indietro in modo da poter affrontare piccoli dislivelli come ad esempio una soglia.

Misure e dimensioni di una carrozzina


La scelta delle giuste dimensioni della carrozzina è fondamentale per il comfort dell'utente e per mantenere una postura corretta.

Le misure da prendere per il comfort dell'utente e/o dell'assistente sono le seguenti: l'ampiezza, la profondità e l'altezza del sedile, l'altezza dei braccioli, l'altezza dello schienale, la misura della distanza tra pedana e sedile, l'altezza della maniglia di spinta.

Il Centro per una vita indipendente è in grado di:

- Fornire informazioni sulla gamma di carrozzine e sulle caratteristiche disponibili.
- Offrire la possibilità di provare varie carrozzine di diversi fornitori.
- Dispone di un'ausilioteca, ossia un servizio di noleggio dell'attrezzatura, attraverso il quale è possibile organizzare il noleggio di una carrozzina per un breve periodo.

Sono disponibili brochure su altri argomenti

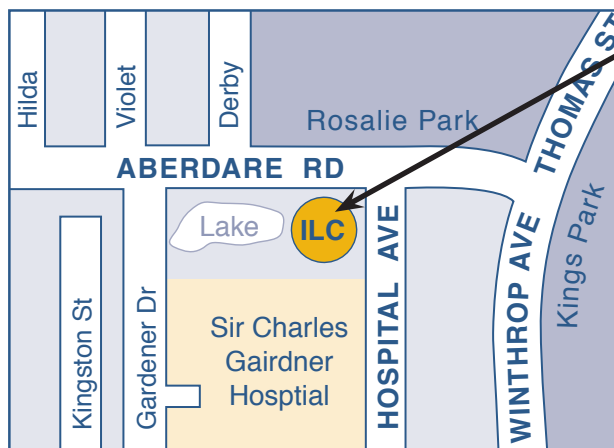

Dove siamo

The Niche
Suite A, 11 Aberdare Road
NEDLANDS WA 6009

Centralino: (08) 9381 0600

Chiamate da zone rurali:
1300 885 886

Fax: (08) 9381 0611

www: www.ilc.com.au