



Independent
Living Centre
of WA (Inc)



Zachodnioaustralijskie Centrum Na Rzecz Samodzielnego Życia (Inc)

Centrum Na Rzecz Samodzielnego Życia służy bezpłatnymi i wiarygodnymi informacjami oraz poradami, pomocnymi przy wyborze odpowiednich artykułów.

The Niche, Suite A, 11 Aberdare Road, NEDLANDS WA 6009 Telefon: 1300 885 886 Infolinia: (08) 9381 0608

Wybór podnośnika do domu

Podnośniki do domu

Podnośniki służą do podnoszenia osób mających problemy z poruszaniem się, dzięki czemu zwalniają z konieczności wykonywania tej czynności ręcznie. Określenie potrzeb osoby podnoszonej oraz opiekuna pozwoli dokonać najlepszego wyboru.



Dostępne są podnośniki różnego typu:

Typ podnośnika

- Przenośny
- Przenośny stojący/do higieny osobistej
- Z szyną montowaną na suficie oraz szyną górną
- Na stojaku
- Mocowany na ścianie lub w podłodze
- Łazienkowy (mocowany lub przenośny)
- Łazienkowy dźwig

Sposób działania

- Najpowszechniej używane są podnośniki obsługiwane ręcznie (hydrauliczne) oraz z napędem elektrycznym (akumulatorowe).

Kryteria

Użytkownik/Opiekun

- Jakie są potrzeby użytkownika?
- Czy podnośnik odpowiada zarówno użytkownikowi jak i jego rodzinie lub opiekunom?
- Czy opiekun jest zdolny obsługiwać i manewrować podnośnikiem, a także czy poradzi sobie z nosidłem? (Konieczne jest przeszkolenie).


Otoczenie i podnośnik

- Czy w miejscach, gdzie użytkowane będzie urządzenie (pomiędzy pokojami, w progach, korytarzach i na zakrętach) jest wystarczająco dużo miejsca na manewry?
- Czy podnośnik ma być używany do przenoszenia do wanny i czy podstawa zmieści się obok wanny? Warto jest także rozważyć wybór podnośnika łazienkowego, mocowanego podnośnika łazienkowego oraz podnośnika mocowanego na suficie.
- Czy przy maksymalnym rozłożeniu podstawy jest wystarczająco miejsca (czy zmieści się pod meble)?
- Czy łóżko jest wystarczająco wysokie, aby podnośnik mógł swobodnie go dosięgnąć? Zastanów się nad użyciem specjalnego podwyższenia.
- Jaki rodzaj podnośnika będzie najodpowiedniejszy - mechaniczny, hydrauliczny czy elektryczny? Rozważ takie cechy jak płynność ruchu, wymagana siła obsługującego oraz to, w jakim stopniu podnoszona osoba może pomóc w czasie podnoszenia.
- Jaki jest zasięg podnośnika? Czy umożliwi podniesienie osoby z podłogi? Czy podniesienie do najwyższego możliwego punktu powoduje uniesienie osoby ponad łóżko, wózek itp.
- Jaki rodzaj nosidła będzie używany?

Istnieje wiele rodzajów nosideł o różnym przeznaczeniu. Podnośniki i nosidła, użytkowane prawidłowo, pozwalają na poprawę bezpieczeństwa przenoszenia osoby przez opiekuna w porównaniu z przenoszeniem ręcznym.

- Jeżeli podnośnik ma być używany na dywanie:
Czy urządzenie przenośne będzie łatwo przesuwano się po dywanie?
Czy podkładki nie będą utrudniać jego przemieszczania?
- Duże rolki ułatwiają manewrowanie, jednak wymagają większej przestrzeni pomiędzy meblami, a podłogą.
- Czy w domu jest wystarczająco dużo miejsca do składowania podnośnika, kiedy nie będzie używany?
- Czy trzeba go będzie rozmontować w tym celu?
- Jaka jest dostępność serwisu?
- Podnośniki z zasilaniem akumulatorowym wymagają regularnego ładowania.

Staranna ocena potrzeb użytkownika i opiekuna oraz miejsca użytkowania jest niezbędna do dokonania wyboru podnośnika i nosidła, które sprawdzą się w każdej sytuacji.

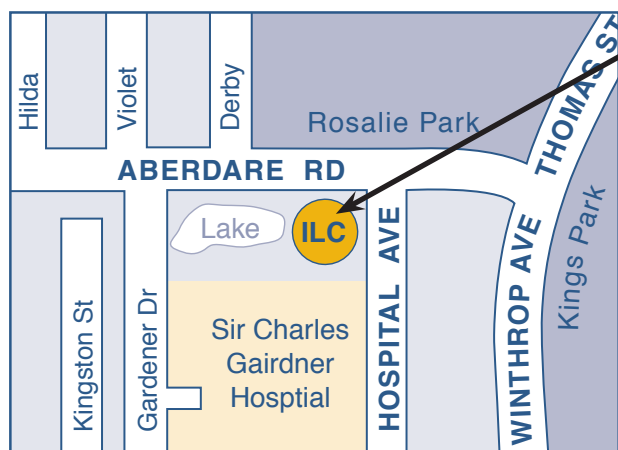

Jak do nas trafić

The Niche
Suite A, 11 Aberdare Road
NEDLANDS WA 6009

Recepcja: (08) 9381 0600

Połączenie zamiejscowe:
1300 885 886

Faks: (08) 9381 0611

Strona www: www.ilc.com.au

© Copyright - Independent Living Centre