



Independent  
Living Centre  
of WA (Inc)



Zachodnioaustralijskie Centrum Na Rzecz Samodzielnego Życia (Inc)

Centrum Na Rzecz Samodzielnego Życia służy bezpłatnymi i wiarygodnymi informacjami oraz poradami, pomocnymi przy wyborze odpowiednich artykułów.

The Niche, Suite A, 11 Aberdare Road, NEDLANDS WA 6009 Telefon: 1300 885 886 Infolinia: (08) 9381 0608

## Rodzaje balkoników

### Balkoniki bez kółek

Najlepsze dla osób, które mają niepewny chód i słabe poczucie równowagi, potrzebujących podpory bardziej stabilnej niż balkonik na kółkach.

Zaleca się, aby balkonik posiadał regulację wysokości i aby był składany. Powinien być lekki. Powinien posiadać instrukcję użytkowania.



### Balkoniki wyposażone w kółka

#### Balkoniki wyposażone w dwa kółka z przodu i hamulce oraz ślizgi z tyłu


Łatwe w użyciu dla osób, które:

- Nie są w stanie przenieść standardowego balkonika.
- Nie potrafią właściwie kierować standardowym balkonikiem.

Najlepiej nadają się do użytkowania wewnątrz.

Ślizgi trudno przesuwają się po szorstkich powierzchniach zewnętrznych.

Przemieszcza się je najpierw przechylając, a następnie popychając.

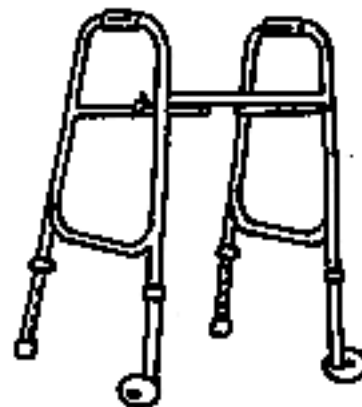


## Balkoniki na trzech kółkach

Odpowiednie dla osób, które mają dość pewny chód oraz są w stanie uruchomić hamulec.

Dobra sterowność wewnątrz i na zewnątrz.

Należy rozłożyć przyrząd w pełni, w przeciwnym razie może się przewrócić.

Dostępne są również dodatkowe elementy wyposażenia, takie jak stolik, torba, czy koszyk, które umożliwiają przenoszenie różnych przedmiotów.

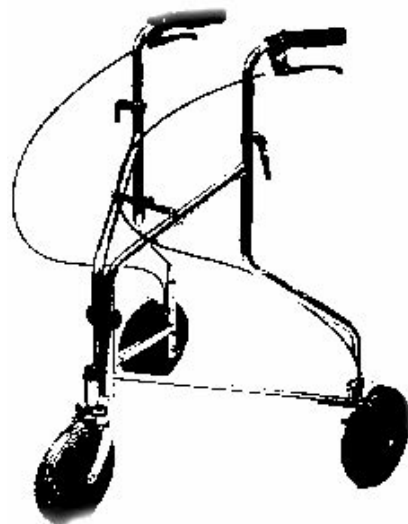

## Balkoniki na czterech kółkach

Odpowiednie dla osób o dość dobrym poczuciu równowagi i pewnym chodzie, które potrzebują dodatkowego podparcia przy pokonywaniu dłuższych odległości lub chciałyby mieć w każdej chwili na czym usiąść. Ważne jest, aby użytkownik był w stanie uruchamiać hamulec. Dostępne są różne modele. Aby wybrać właściwy, należy rozważyć poniższe punkty:

Rodzaj hamulców:

- Ręczny
- typu „stopper”.
- łatwy w użyciu.

Waga – niektóre z balkoników są ciężkie.

Sposób składania – czy łatwo jest umieścić przyrząd w bagażniku?

Regulowana wysokość uchwytów/podłokietników

Czy posiada siedzisko?


Opony: z gumy mikrokomórkowej/z gumy litej/wypełnione powietrzem

Kosz i stolik

Rączki – od kształtu zależy wygoda



***Dostępne są również broszury informacyjne na inne tematy***

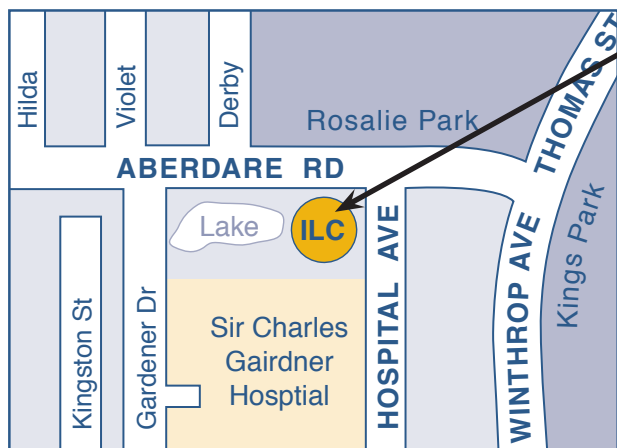

### Jak do nas trafić

The Niche  
Suite A, 11 Aberdare Road  
NEDLANDS WA 6009

Recepcja: (08) 9381 0600  
Połączenie zamiejscowe:

1300 885 886

Faks: (08) 9381 0611

Strona www: [www.ilc.com.au](http://www.ilc.com.au)