



Independent
Living Centre
of WA (Inc)



Zachodnioaustralijskie Centrum Na Rzecz Samodzielnego Życia (Inc)

Centrum Na Rzecz Samodzielnego Życia służy bezpłatnymi i wiarygodnymi informacjami oraz poradami, pomocnymi przy wyborze odpowiednich artykułów.

The Niche, Suite A, 11 Aberdare Road, NEDLANDS WA 6009 Telefon: 1300 885 886 Infolinia: (08) 9381 0608

Wybór balkonika

Balkoniki mogą posiadać:

- kółka
- hamulce
- siedzisko

Inne elementy opcjonalne obejmują:

- stolik/torbę/koszyk
- opony różnego typu
- rączki różnego typu
- podłokietniki

Balkoniki bez kółek

Najlepsze dla osób, które mają niepewny chód i słabe poczucie równowagi, potrzebujących podpory bardziej stabilnej niż balkonik na kółkach.

- Czy balkonik zapewnia użytkownikowi poczucie bezpieczeństwa?
- Czy stanowi wystarczające podparcie?
- Czy posiada regulację wysokości i czy jego wysokość umożliwia przyjęcie postawy wyprostowanej?
- Powinien być lekki.
- Powinien posiadać instrukcję użytkowania.



Balkoniki wyposażone w kółka


Balkoniki wyposażone w dwa kółka z przodu i hamulce oraz ślizgi z tyłu

Łatwe w użyciu dla osób, które:

- Nie są w stanie przenieść standardowego balkonika.
- Nie potrafią właściwie kierować standardowym balkonikiem.

Najlepiej nadają się do użytkowania wewnątrz.
Ślizgi trudno przesuwają się po szorstkich nawierzchniach zewnętrznych.
Przemieszcza się je najpierw przechylając, a następnie popychając.

Czy potrafisz manewrować balkonikiem na kółkach?

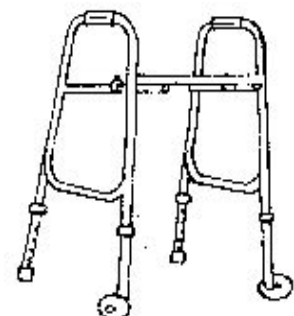

Balkoniki na trzech kółkach

**Czy potrzebujesz hamulca?
Czy jesteś w stanie go używać?**

Odpowiednie dla osób, które mają dość pewny chód i są w stanie uruchomić hamulec.

Dobra sterowalność wewnątrz i na zewnątrz.
Należy rozłożyć przyrząd w pełni, w przeciwnym razie może się przewrócić.



Dostępne są również dodatkowe elementy wyposażenia, takie jak stolik, torba, czy koszyk, które umożliwiają przenoszenie różnych przedmiotów.


Balkoniki na czterech kółkach

Odpowiednie dla osób o dość dobrym poczuciu równowagi i pewnym chodzie, które potrzebują dodatkowego podparcia przy pokonywaniu dłuższych odległości lub chciałyby mieć w każdej chwili na czym usiąść. Ważne jest, aby użytkownik był w stanie uruchamiać hamulec. Dostępne są różne modele. Aby wybrać właściwy, należy rozważyć poniższe punkty:

- Rodzaj hamulców: ręczny lub hamulec typu „stopper”. Hamulce łatwe w użyciu.
- Waga – niektóre z balkoników są ciężkie.
- Sposób składania – czy łatwo jest umieścić przyrząd w bagażniku?
- Regulowana wysokość uchwytów/podłokietników
- Czy posiada siedzisko?
- Opony: z gumy mikrokomórkowej/litej/wypełnione powietrzem
- Kosz i stolik
- Rączki – od kształtu zależy wygoda



Dostępne są również broszury informacyjne na inne tematy

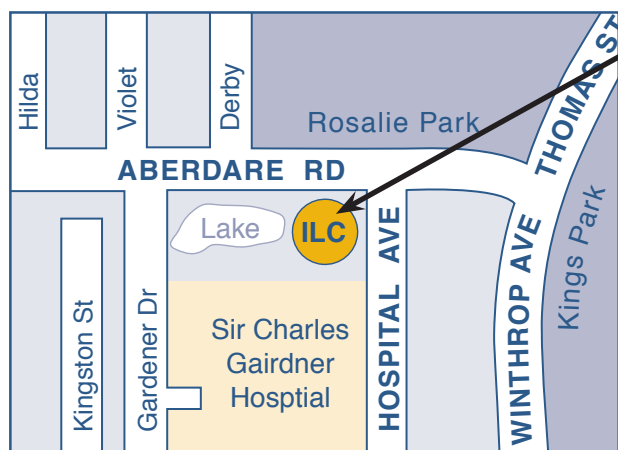

Jak do nas trafić

The Niche
Suite A, 11 Aberdare Road
NEDLANDS WA 6009

Recepcja: (08) 9381 0600
Połączenie zamiejscowe:

1300 885 886

Faks: (08) 9381 0611

Strona www: www.ilc.com.au

© Copyright - Independent Living Centre